

TRANSPORTNA KOLICA ZA TUŠIRANJE
ALUMINIJSKA BIJELA
Šifra proizvoda: FS7962L
Upute za korištenje
(prijevod)




1. KARAKTERISTIKE

Transportna tuš stolica izrađena je od aluminijskog okvira. Sastoji se od naslona za leđa i sjedala u obliku slova U od izdržljivog PVC-a, nasloni za ruke na preklop, sklopivi naslon za noge, čvrsti stražnji kotači (6") i okretni prednji kotači (4") s kočnicama za blokiranje.

Dijelovi tuš stolice:

- Naslon za leđa
- Naslon za ruku
- Sjedalo
- Zatik za zaključavanje
- Montažni vijak
- Oslonac za noge
- Blokada kotača

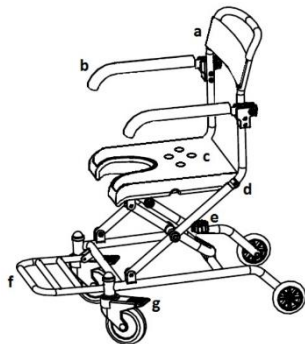

2. PRIMJENA

Transportna tuš stolica je pomoćna oprema koja pomaže korisniku za obavljanje higijenskih radnji. Stolica se preporučuje ljudima sa smanjenom pokretljivošću, disfunkcijama i motoričkim poremećajima. Stolica se koristiti samo uz pomoć osobe u pratnji. Dizajnirana je za korištenje unutar zgrade, kod kuće, u bolnicama.

3. MONTAŽA

Korak 1. Otklopite oslonac za noge.

Korak 2. Podignite sjedalo i pričvrstite ga na stražnji dio okvira zatezanjem montažnog vijka.

Korak 3. Umetnite cijevi naslona u stražnji dio okvira i učvrstite naslon sjedala pomoću zatika za zaključavanje.

Korak 4. Spustite naslone za ruke.

Stolica je spremna za korištenje.

4. TEHNIČKI PODACI :

Ukupna širina	54 cm
Ukupna dubina	74 cm
Visina sjedišta od podloge	47 cm
Ukupna visina	88 cm
Dimenzije sjedala	40 x 37,5 cm
Težina	6 kg
Maksimalna nosivost	100 kg

5. NAPOMENE I PREPORUKE:

Timago International Group ne snosi odgovornost za neprimjereno korištenje invalidskih kolica, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporaba.

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovito održavajte dijelove stolice:

- Stolica se može čistiti vlažnom krpom i hladnom ili toplom vodom. Teške mrlje možete očistiti spužvom. Osušite se od izvora topline.

7. UVJETI SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

8. INFORMACIJE O JAMSTVU

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenoj kartici dostupnoj na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Imajte na umu da za potrebe jamstva treba zadržati dokaz o kupnji (račun).

9. OZNAKE

	POZIV NA BROJ		PROIZVOĐAČ
	LOT BROJ		DATUM PROIZVODNJE
	SERIJSKI BROJ		MEDICINSKI PROIZVOD
	NAPOMENA		MOLIM PROČITAJTE UPUTE
	PROIZVOĐAČ JE ISPITAO PROIZVOD I OCIJENIO DA ON ISPUNJAVA ZAHTJEVE EU-A U PODRUČJU SIGURNOSTI, ZDRAVLJA I OKOLIŠA		

Proizvođač

Prodavatelj u RH



Timago International
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Orto i Medi centar d.o.o.
Specijalizirana prodavaonica
Grižanska 6
10 040 Zagreb

Tel 01/2911 366
E-mail: info@omc.hr
info@omc.hr
www.omc.hr