

## UPUTE ZA KORIŠTENJE (prijevod)

Stolica za tuširanje s naslonom  
Šifra proizvoda: TGR-R KP 350L



### 1. KARAKTERISTIKE


Stolica za tuširanje sastoji se od aluminijskog okvira, naslona i širokog sjedala, koji su izrađeni od izdržljivog PVC-a. Stolica je ima podesive noge po visini s protukliznim gumenim vrhovima i integriranim ručkama koji olakšavaju korištenje proizvoda. Posebno dizajnirani gumeni vrhovi spriječiti će klizanje stolice po mokrim površinama. Stolica se isporučuje s posebnim glavama vijaka (krilasta), koje olakšavaju montažu.

Set uključuje:

- naslon za leđa – 1 kom
- sjedalo – 1 kom
- postolje za stolice – 2 kom
- noge podesive po visini – 4 kom
- cijevi naslona – 2 kom
- montažni vijci (krilasti vijci) – 9 kom
- čelične podložne pločice – 9 kom
- plastične podložne pločice

Elementi stolice za tuširanje:

- a. naslon za leđa
- b. cijevi naslona
- c. sjedalo
- d. bazne cijevi
- e. podešavanje visine – TF sustav
- f. gumeni čepovi protiv klizanja

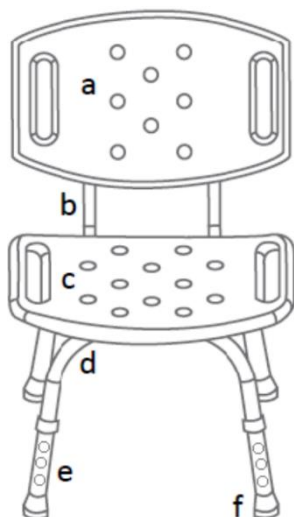

### 2. PRIMJENA

Stolica za tuširanje je pomoćna oprema koja pomaže korisniku obavljati higijenske radnje. Stolica se preporučuje osobama sa smanjenom pokretljivošću, a može se koristiti u pod tušem, u kadi, u kupaonicama i drugim vlažnim prostorijama kod kuće i u bolnicama.

### 3. MONTAŽA

- Korak 1.** Postavite sjedalo naopako na ravnu površinu.
- Korak 2.** Učvrstite ukrštene bazne cijevi sa sjedištem u sredini pomoću jednog krilastog vijka s podloškom (čelična i plastična).
- Korak 3.** Spojite osnovne cijevi s nogama na ploču za sjedenje.
- Korak 4.** Pričvrstite cijevi naslona na cijevi baze pomoću četiri krilasta vijka s podloškama.
- Korak 5.** Postavite sastavljenu stolicu za tuširanje na noge i zategnite naslon za leđa pomoću četiri krilasta vijka s podloškama.
- Napomena: provjerite ujednačenost zategnutosti svih krilastih vijaka!

### PODEŠAVANJE VISINE

Za podešavanje visine stolice za tuširanje pritisnite metalni potisni gumb na nozi, te odaberite odgovarajuću visinu noge. Novu visinu odredite puštanjem metalnog potisnog gumba na odgovarajućoj rupi. Na isti način podesite visine ostalih nogu.

### 4. TEHNIČKI PODACI

Širina	49 cm
Dubina	44 cm
Visina sjedišta	36-46 cm
Ukupna visina	64 – 74 cm
Dimenzije	49 x 29 cm
Težina stolice	3 kg
Dozvoljeno opterećenje	100 kg



## 5. NAPOMENE

Timago International Group ne snosi odgovornost za neprimjereno korištenje stolice za tuširanje, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporaba.

## 6. ODRŽAVANJE

Stolicu za tuširanje redovito čistite samo vodom, spužvom i blagim deterdžentima za plastične materijale. Temeljito sve osušite.

Ne koristite za čišćenje: jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivač, benzin ili otapala (može uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i kao posljedicu - gubitak prava na jamstvo).

Barem jednom svaka tri mjeseca provjerite:

- Zategnutost krilastih vijaka
- stanje potisnih gumbi da su istaknuti prema van
- stanje cijevi (ako ima pukotina)

Preporuča se redovito provjeravati gumene vrhove. U slučaju istrošenosti, vrhove zamijenite novima.


## 7. UVJETI SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

## 8. INFORMACIJE O JAMSTVU

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na web stranici proizvođača. Obratite se prodavaču od kojeg ste kupili proizvod, te je stoga potrebno sačuvati i račun o kupnji.

## 9. OZNAKE

	POZIV NA BROJ		PROIZVOĐAČ
	LOT BROJ		DATUM PROIZVODNJE
	SERIJSKI BROJ		MEDICINSKI PROIZVOD
	NAPOMENA		MOLIM PROČITAJTE UPUTE
	PROIZVOĐAČ JE ISPITAO PROIZVOD I OCIJENIO DA ON ISPUNJAVA ZAHTJEVE EU-A U PODRUČJU SIGURNOSTI, ZDRAVLJA I OKOLIŠA		

Naš kompletan asortiman proizvoda dostupan je kod vašeg prodavača, te mu se slobodno obratite.

Saznajte više na: [www.timago.com](http://www.timago.com). Hvala što ste odabrali Timago!

### PROIZVOĐAČ:



Timago International **TIMAGO.COM**  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska  
T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)

**DISTRIBUTER**  
u Republici Hrvatskoj



**Orto i Medi centar d.o.o.**  
Specijalizirana prodavaonica  
Grižanska 6  
[10 040 Zagreb](http://10.040.Zagreb)

Tel 01/2911 366  
E-mail: [info@omc.hr](mailto:info@omc.hr)  
[www.omc.hr](http://www.omc.hr)